



**INFRAČERVENÉ
SOLÁRIUM**

JAK TO FUNGUJE



Kůň je sportovec, a proto je pravděpodobné, že utrpí zranění bez ohledu na to, na jaké úrovni soutěží. Výzkum ukázal, že terapeutické teplo je univerzální léčbou chronických zranění, protože teplo hraje zásadní roli v rehabilitaci.

Infračervené světlo prokazatelně zlepšuje krevní oběh, napomáhá rychlému vstřebávání cukru ve svalech a rychlému odvádění kyseliny mléčné; výsledkem je výrazné zlepšení výkonnosti koně.












VÝHODY MK SOLÁRIA

Naše MK Infračervené solárium je vybaveno 20 infračervenými lampami. Každý segment osvětlení je vybaven 5 lampami a 4 ventilátory. Infračervené lampy nejsou díky otevřené konstrukci systému poškozovány vlhkým prostředím, které vzniká při práci s koněm. Infračervené zářivky procházejí zadní částí solária a jsou vedeny skrz rozvody zářivek, čímž vytvářejí dvojí funkci: ochlazují zářivky a zároveň rychle suší koně.

Naše zařízení jsou věnována zlepšování pohody vašeho koně a zaměřují se na rozvoj jeho fyzického, emočního a fyziologického stavu.

Náš systém nabízí následující výhody:

-  **Zlepšení krevního oběhu**
Zvyšuje průtok krve a podporuje rozšíření cév.
-  **Uvolnění svalů**
Pomáhá uvolnit napjaté svaly po tréninku.
-  **Urychlená regenerace**
Zkracuje dobu zotavení po intenzivní fyzické námaze.
-  **Úleva od bolesti**
Zmírňuje bolest svalů a kloubů.
-  **Zlepšená pružnost svalů**
Zvyšuje elasticitu svalů a pojivových tkání.
-  **Regulace tělesné teploty**
Pomáhá s regulací teploty během chladnějších období.
-  **Posílení imunitního systému**
Zlepšuje celkové zdraví a pomáhá předcházet nemocem.
-  **Snížení stresu**
Redukuje stres u koní.
-  **Zlepšení stavu srsti**
Podporuje lesklou a zdravou srst.



INFRAČERVENÉ LAMPY S DLOUHOU VLNOVOU DÉLKOU



Co jsou?

Infračervené lampy s dlouhou vlnovou délkou vyzařují infračervené záření, které generuje teplo a tepelnou energii na delší vzdálenosti ve srovnání s běžnými infračervenými lampami. Tyto lampy nacházejí široké využití díky své schopnosti zahřívat objekty a povrchy bez výrazného ohřevu okolního vzduchu.

Efektivní zahřívání

Využívají delší infračervené vlnové délky, které pronikají hlouběji do svalů a tkání.

Cílené teplo

Směřují teplo do konkrétních oblastí, a to i na větší vzdálenost.

Vyrobeno pro dlouhou životnost

Konstruováno pro dlouhodobé a spolehlivé používání.

Skvělé pro terapii

Ideální pro úlevu od svalové bolesti, zlepšení cirkulace a urychlení regenerace.

Tyto lampy činí MK Infračervené solárium vysoce účinným, zajišťujícím vašemu koni potřebnou péči pro udržení zdraví a dosažení nejlepších výkonů.

Životnost lamp

Naše infračervené lampy s dlouhým dosahem vydrží 2 000 hodin. Poté by měly být vyměněny pro zachování optimálního výkonu.

KDY BYSTE MĚLI POUŽÍT MK INFRAČERVENÉ SOLÁRIUM?



👑 Po tréninku

Používejte solárium přímo po tréninku. Pomáhá uvolnit svaly a urychluje regeneraci.

👑 Před tréninkem

Solárium lze použít před jízdou nebo tréninkem k zahřátí svalů a podpoře krevního oběhu, což zlepšuje výkon a předchází zraněním.

👑 Během období rekonvalescence

Pokud se kůň zotavuje po zranění nebo měl období odpočinku, pravidelné používání solária může urychlit hojení a zmírnit bolest.

👑 V chladném počasí

V zimě nebo při nízkých teplotách pomáhá solárium zahřát koně, regulovat tělesnou teplotu a předcházet nadměrnému ochlazení.

👑 Jako součást každodenní péče

Začleňte solárium do každodenní péče o koně pro zlepšení celkového zdraví, stavu kůže a kvality srsti.

JAK POUŽÍVAT SOLÁRIUM



- 👑 Příprava koně**
Před použitím solária se ujistěte, že je kůň čistý. Tím se optimalizuje účinek tepla a světla.
- 👑 Příprava prostoru**
Umístěte solárium do klidného a bezpečného prostoru, mimo rušivé vlivy a ostatní koně. To pomůže koni se během procedury uvolnit.
- 👑 Délka procedury**
Procedury v délce 15 až 30 minut jsou obecně neúčinnější. Začněte s kratšími intervaly a upravujte délku podle individuálních potřeb a tolerance vašeho koně.
- 👑 Kontrola vzdálenosti mezi soláriem a hřbetem koně**
Zajistěte odpovídající vzdálenost od hřbetu koně. V MK doporučujeme vzdálenost přibližně 50 cm, aby nedošlo k tepelnému přehřátí.
- 👑 Sledujte koně**
Pozorujte koně během procedury, abyste se ujistili, že se cítí pohodlně a uvolněně. Pokud se objeví známky nepohodlí, upravte vzdálenost nebo délku expozice.
- 👑 Ukončení procedury**
Po použití solária se ujistěte, že je kůň suchý. Jako závěrečnou péči proveďte kartáčování pro podporu krevního oběhu a celkovou kontrolu jeho stavu.

👑 Mohu si MK infračervené solárium nainstalovat sám?

Jistě! Většina našich zákazníků to zvládne sama. Všechny naše produkty jsou dodávány s montážním materiálem a podrobným instalačním návodem krok za krokem.

👑 Jaký zdroj napájení potřebuji?

Stačí připojení 230 V na samostatném obvodu. Připojení MK infračerveného solária je rychlý a jednoduchý proces, který nevyžaduje elektrikáře. Jsou "plug and play" - zapoj a používej.

👑 Doručíte mi solárium domů?

Vaše volba! Můžeme se postarat o zajištění dopravy k vám nebo si solárium můžete vyzvednout v našem skladě. Naše výrobky přepravujeme denně po celém světě a pro klienty, kteří je potřebují, můžeme zajistit i vývozní dokumenty. Neváhejte se nás zeptat na ceny dopravy.

👑 Jaká je dodací lhůta?

Solárium je pravidelně na skladě.

👑 Jaká je životnost MK infračervených lamp?


MK infračervené lampy mají životnost 2 000 hodin. Poté by měly být vyměněny.

👑 Jak vysoko zavěsit solárium pro koně?



U MK doporučujeme, aby vzdálenost mezi lampami solária a kohoutkem koně byla alespoň 50 cm. Proto musí výška zavěšení umožňovat tuto bezpečnou vzdálenost. Ve společnosti MK máme automatický zvedací systém, který reguluje vzdálenost mezi solárními lampami a kohoutkem koně.

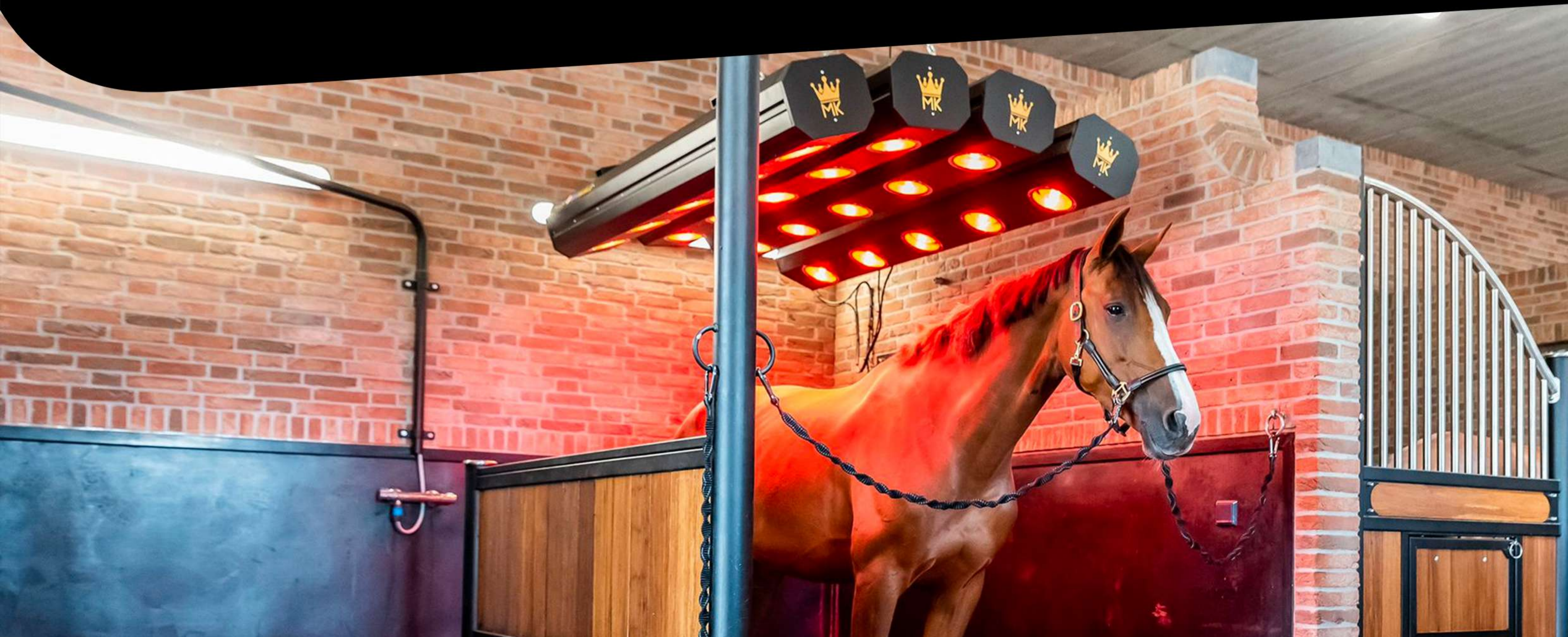



TECHNICKÁ SPECIFIKACE




V MK nabízíme 2 infračervené solária, která splní vaše potřeby:

Specifikace	Premium Model	Compact Model
Spotřeba elektrické energie	 <p>220 – 240V – 50 Hz / 60 Hz a 3080 Watů</p>	 <p>220 – 240V – 50 Hz / 60 Hz a 1600 Watů</p>
Připojení	Na samostatném jističi 16A	Na samostatném jističi 16A
Ventilace	16 ventilátorů (4 segmenty)	8 ventilátorů (2 segmenty)
Světelný výkon	20 lamp o výkonu 150 wattů	10 lamp o výkonu 150 wattů
Dodáváno jako standard	Regulátor průtoku vzduchu a časovač až na 90 minut.	Regulátor průtoku vzduchu a časovač až na 90 minut.

TECHNICKÉ ÚDAJE

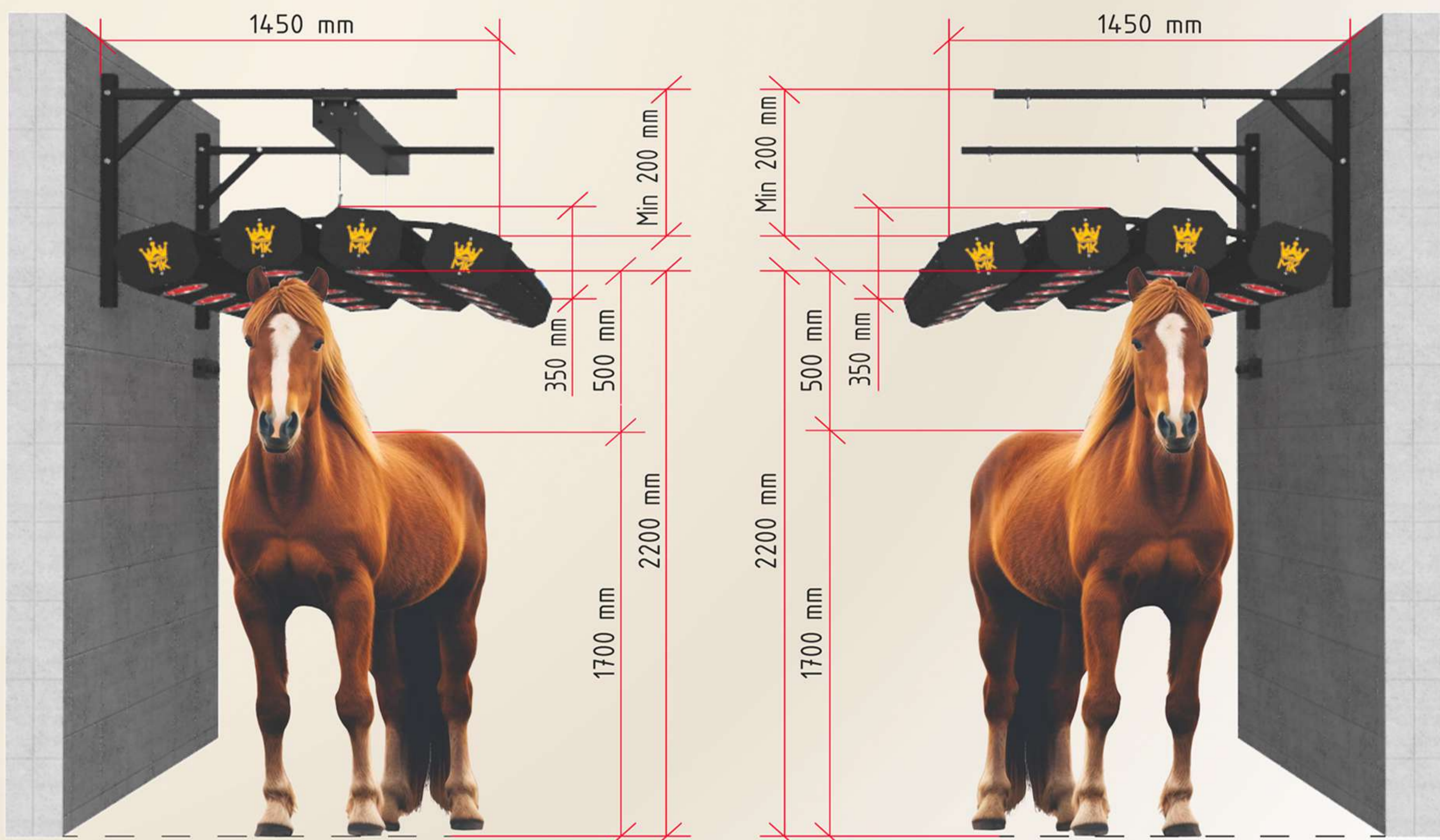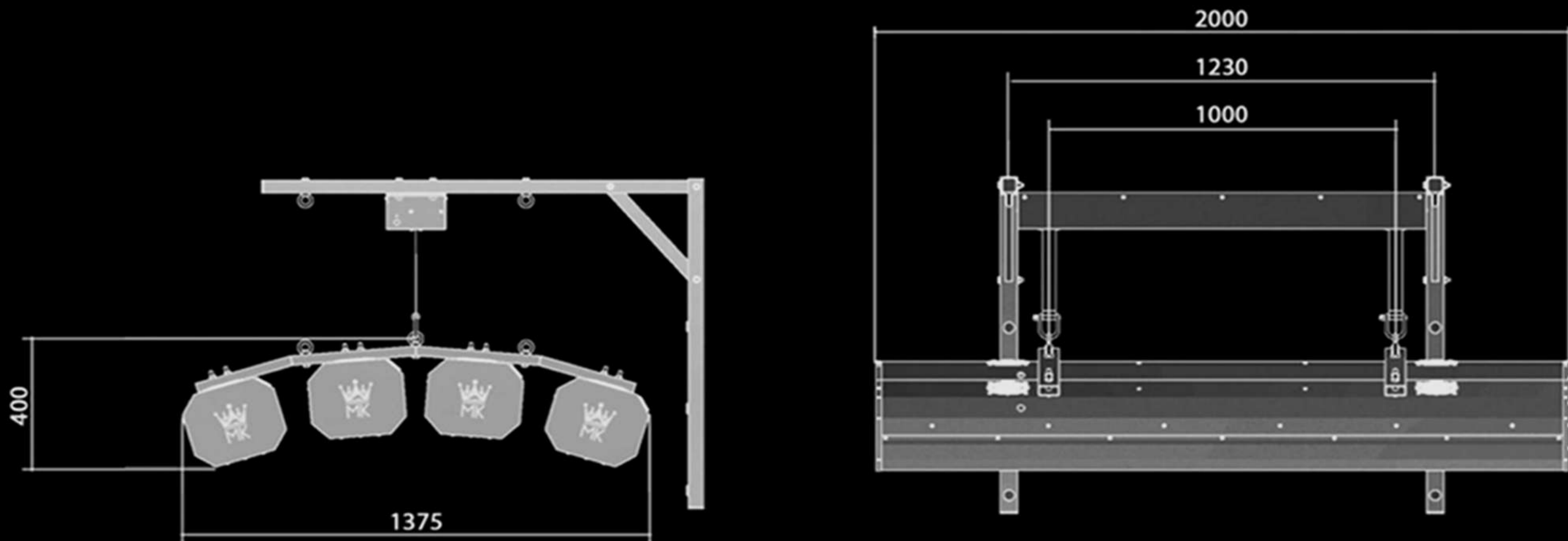

TECHNICKÉ ÚDAJE

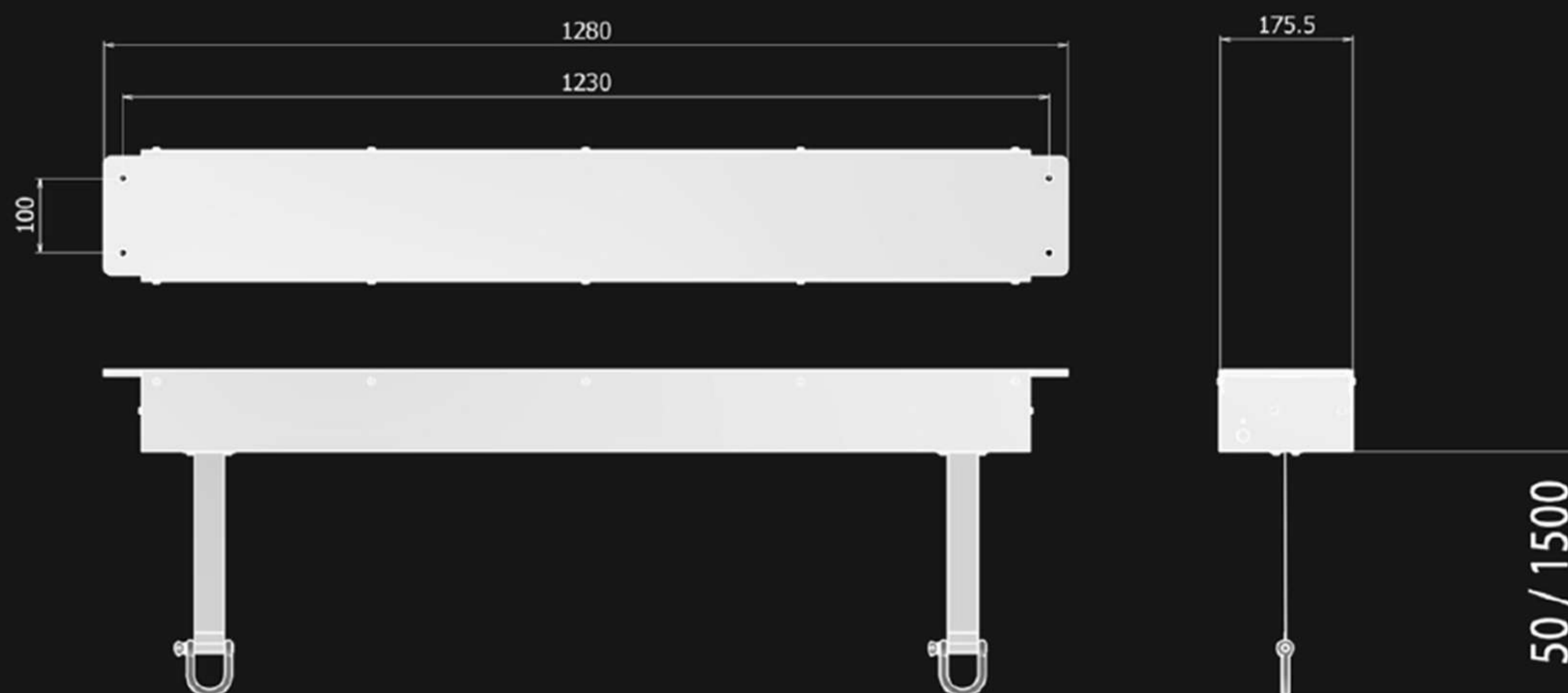

Zvedací zařízení



Mincovník na Euro mince
nebo žetony pro solárium



MK nástěnný držák s černým
práškovým nástřikem MK

KONTAKTUJTE NÁS



OBJEDNEJTE DNES !

Dostanete váš MK Infračervené solárium domů.

👑 Dodání do max. 7 dní ve všech zemích EU.

👑 Mimo Evropu zkontrolujte dodací lhůtu.



Neváhejte mě kontaktovat.

☎ +420 777 556 427

📞 +420 777 556 427

✉ marcela@molenkoning.com

🌐 www.molenkoning.com

📍 Molenkoning BV
25063 Nový Brázdím 107,
Praha východ

📌 Molenkoning Česká republika

📷 [molenkoning_ceska_republika](https://www.instagram.com/molenkoning_ceska_republika)

